



Инструкция по установке программного обеспечения сканера «BRIS» на компьютер «Windows10».


1. Вставьте флешку, которая идет в комплекте со сканером, в разъем USB.

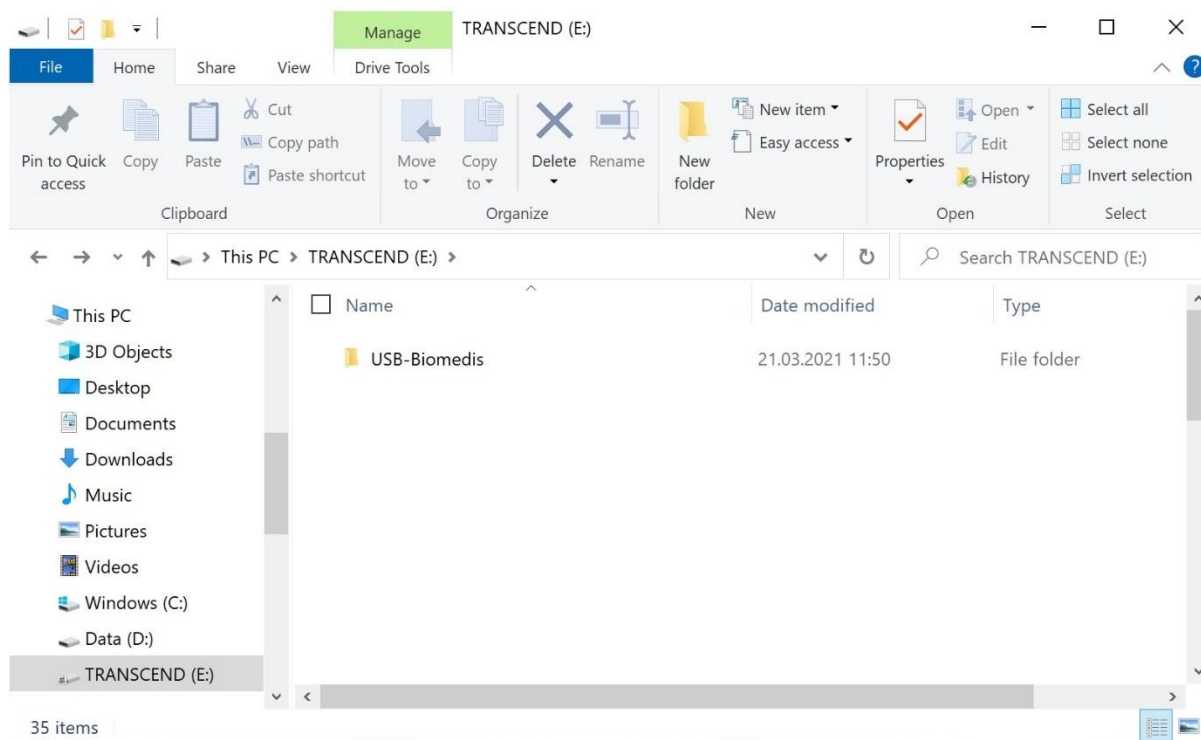


2. Откройте папку «USB-Биомедис»:

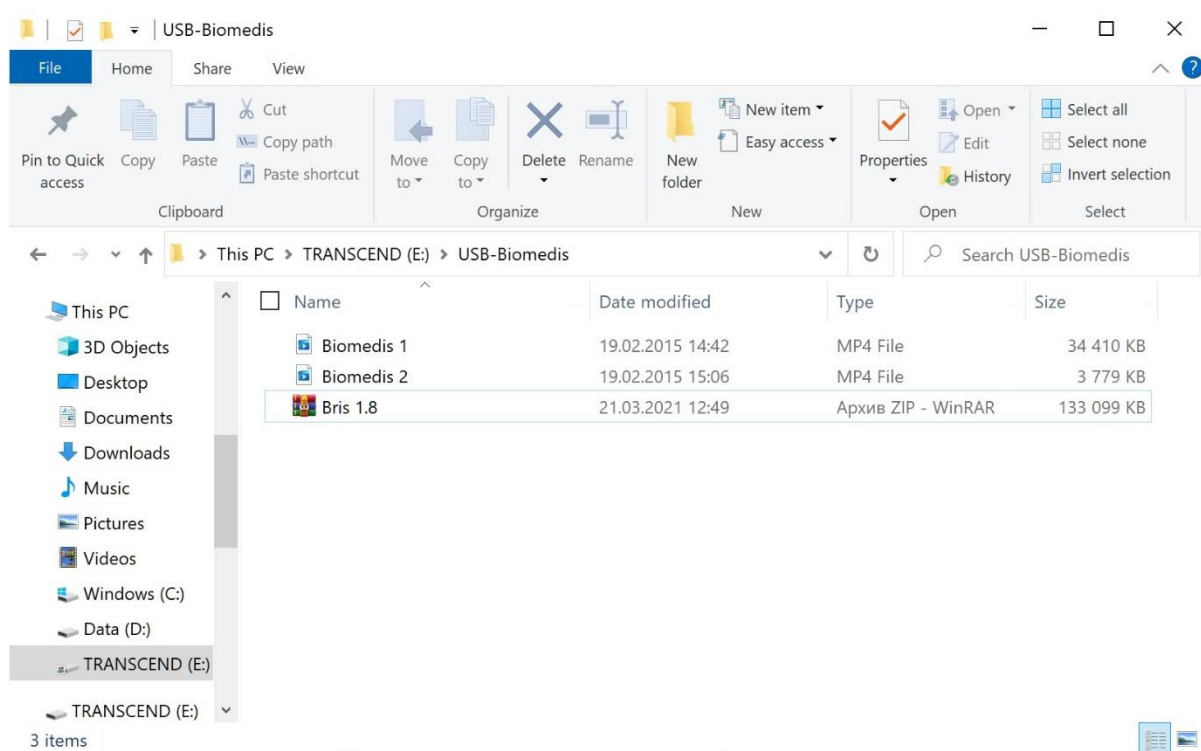


3. Создаем на диске C: папку 2002

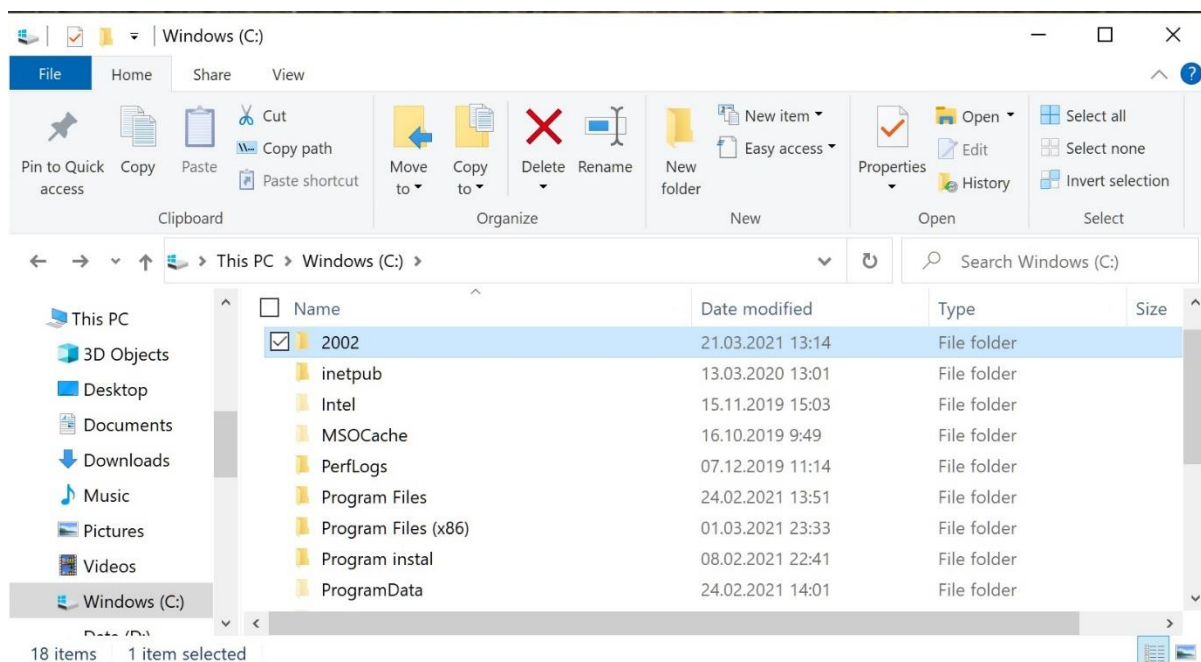


4. Распаковать архив "C:\2002\" в папку 2002

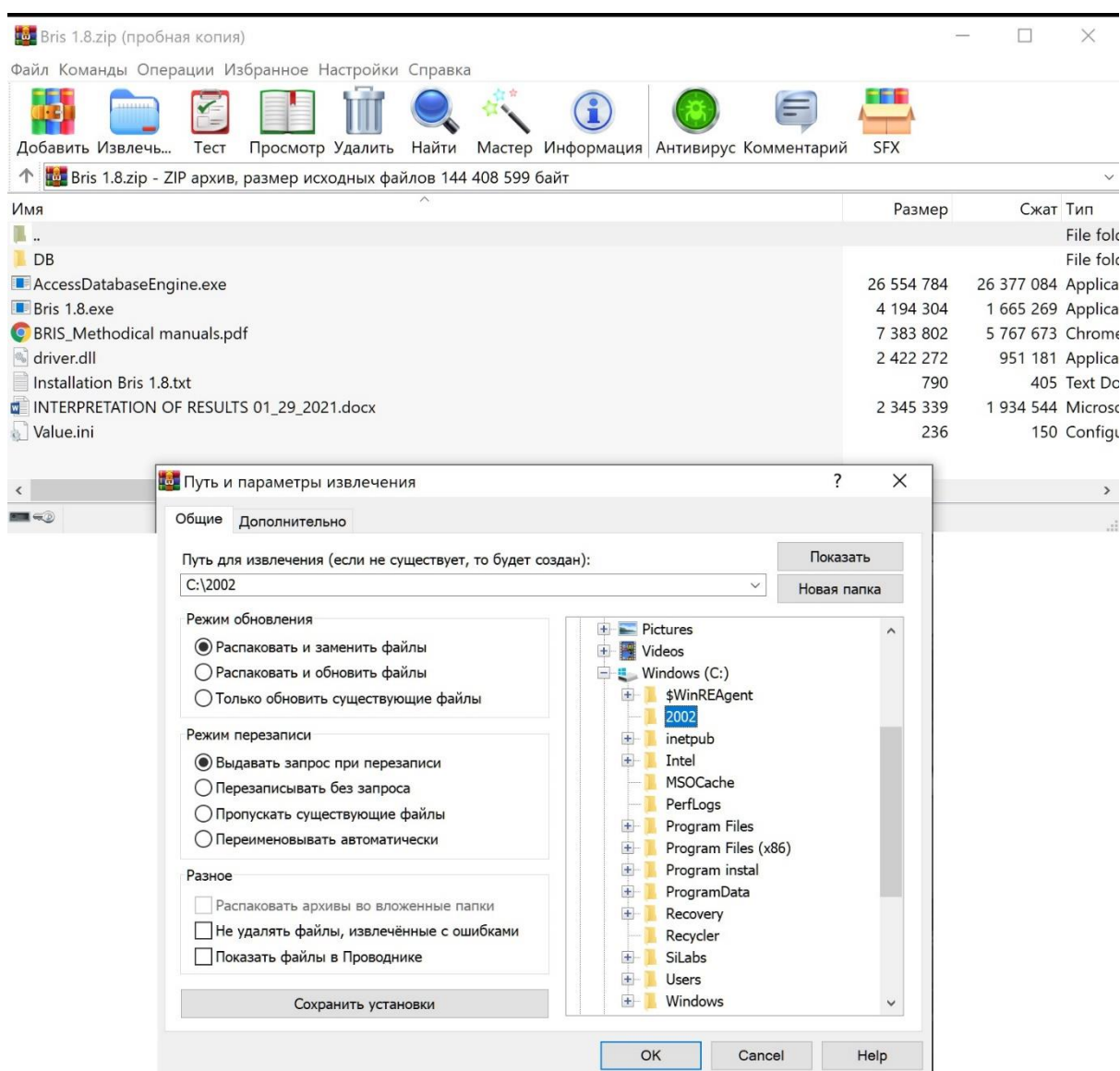

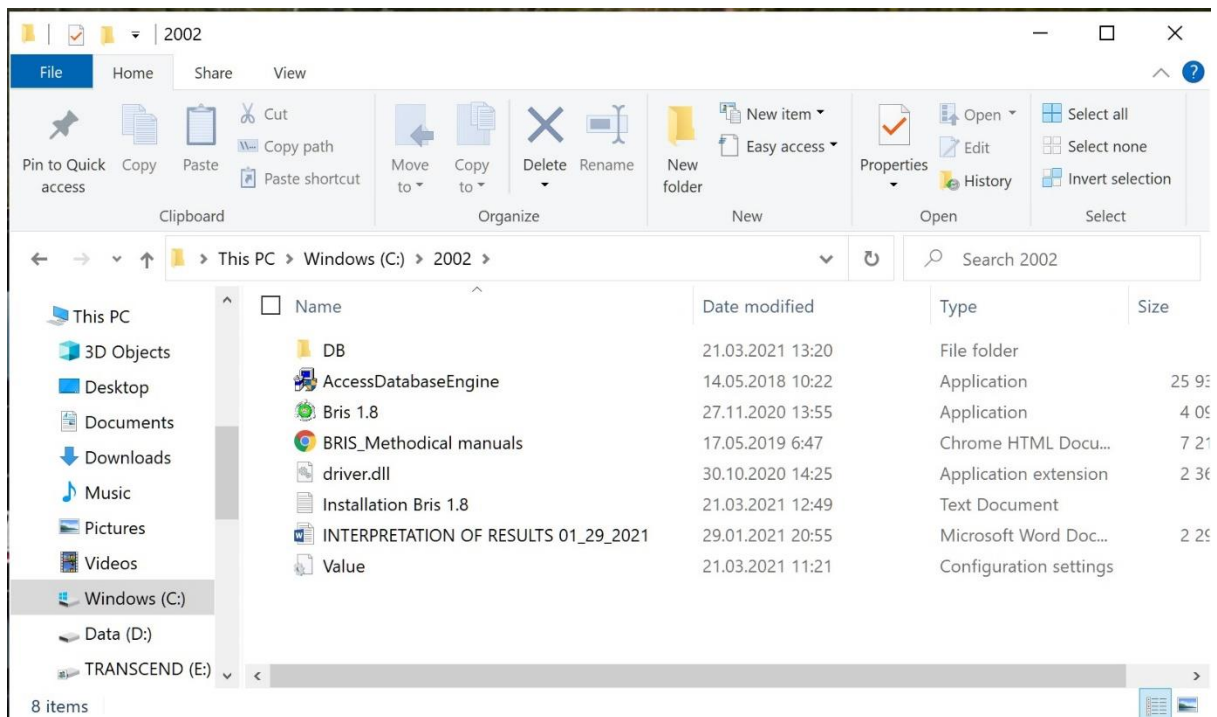


5. Ставим метку программы «Брис 1.8» на рабочий стол.

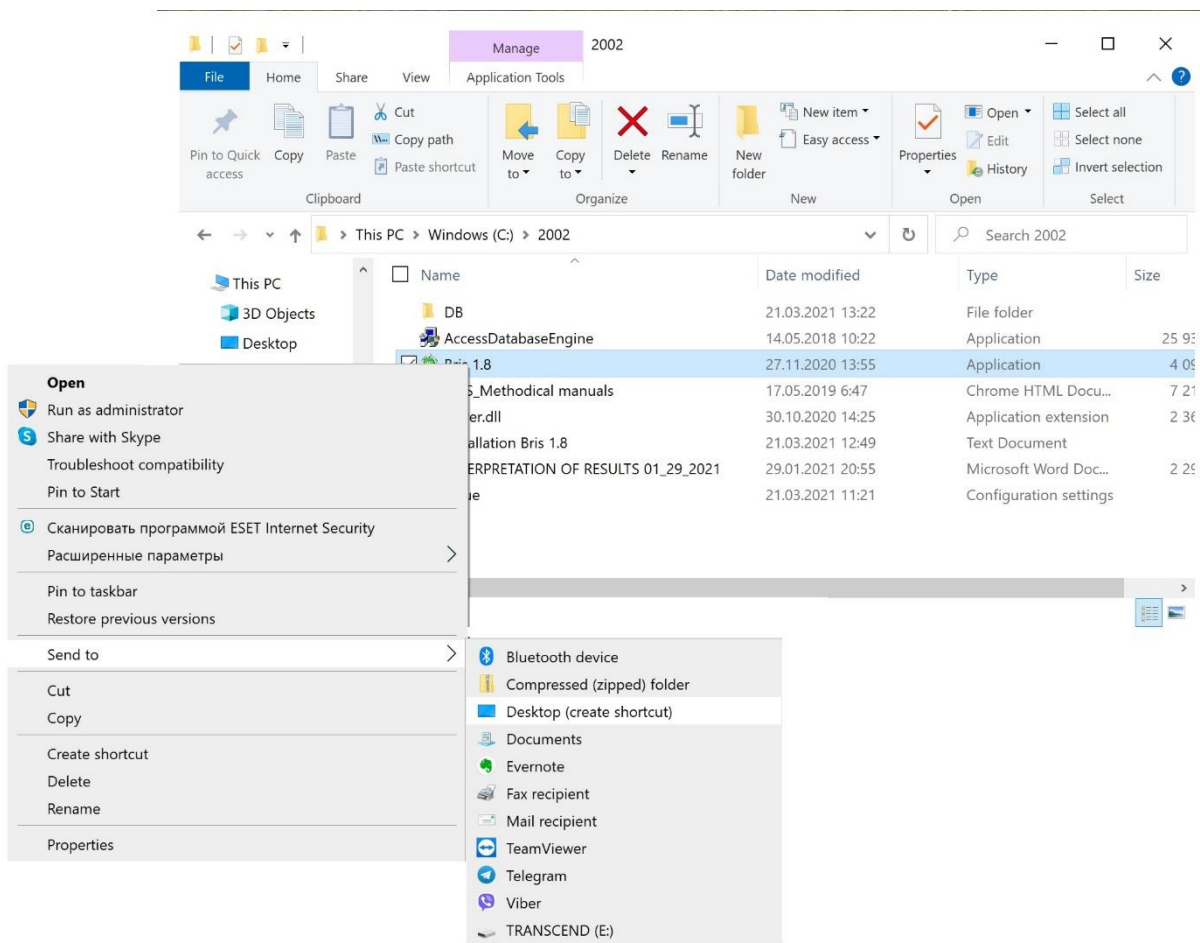


6. Запустите программу «Брис», нажав на иконку




При запуске программа будет запущена на английском языке. Для корректной регистрации пользователей в программе необходимо выполнить пошаговую настройку, описанную в пунктах: 7,8,9,10.

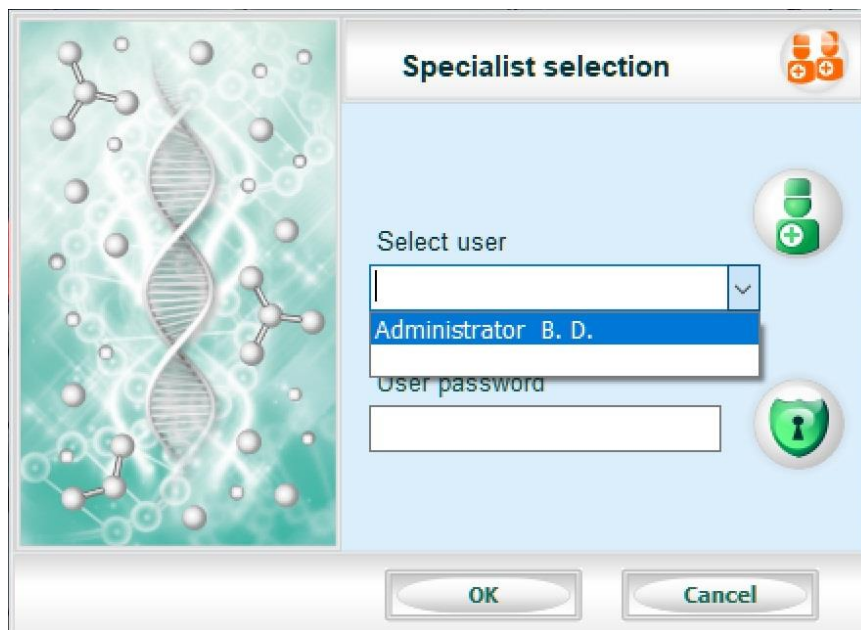


7. Для смены вкладки «Формат» на русский язык необходимо открыть «Панель управления» и выбрать вкладку «Время, язык, регион» или «Региональные стандарты».

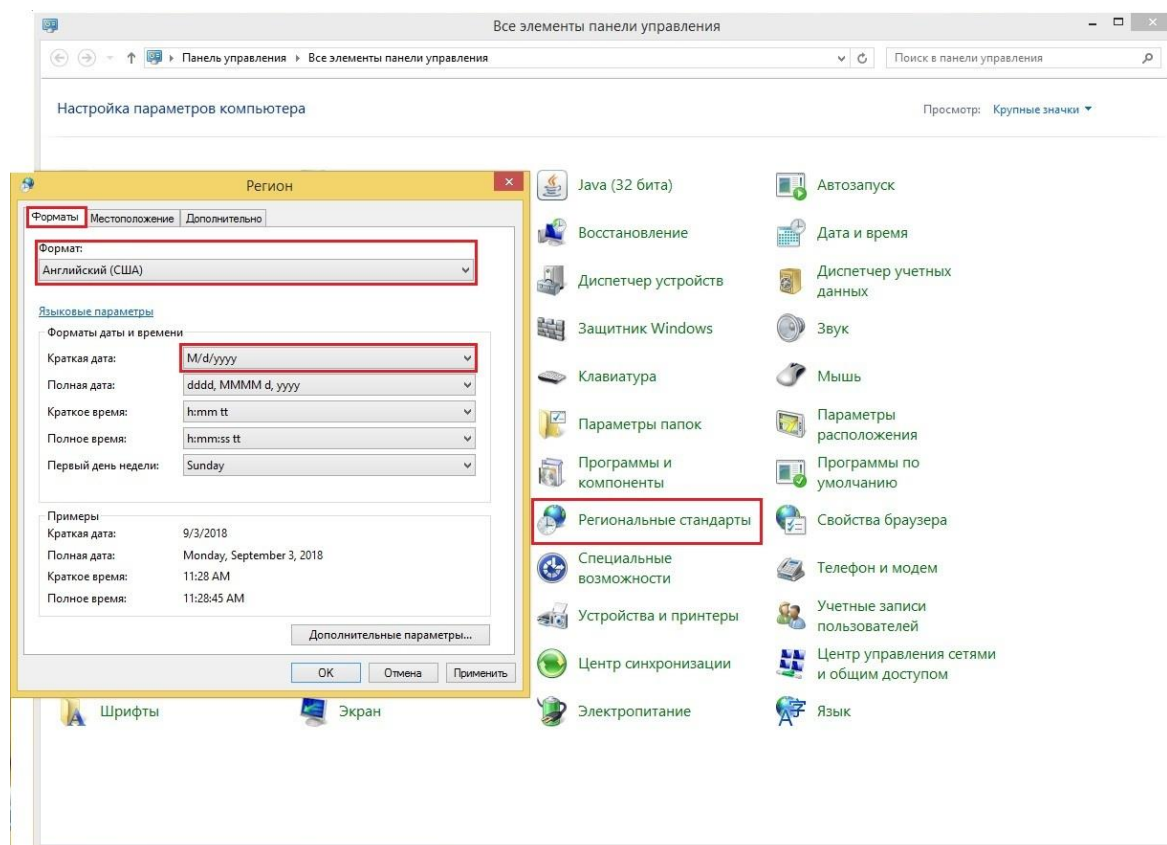


8. Выберите формат «Русский регион» на вкладке «Формат» и установите его.

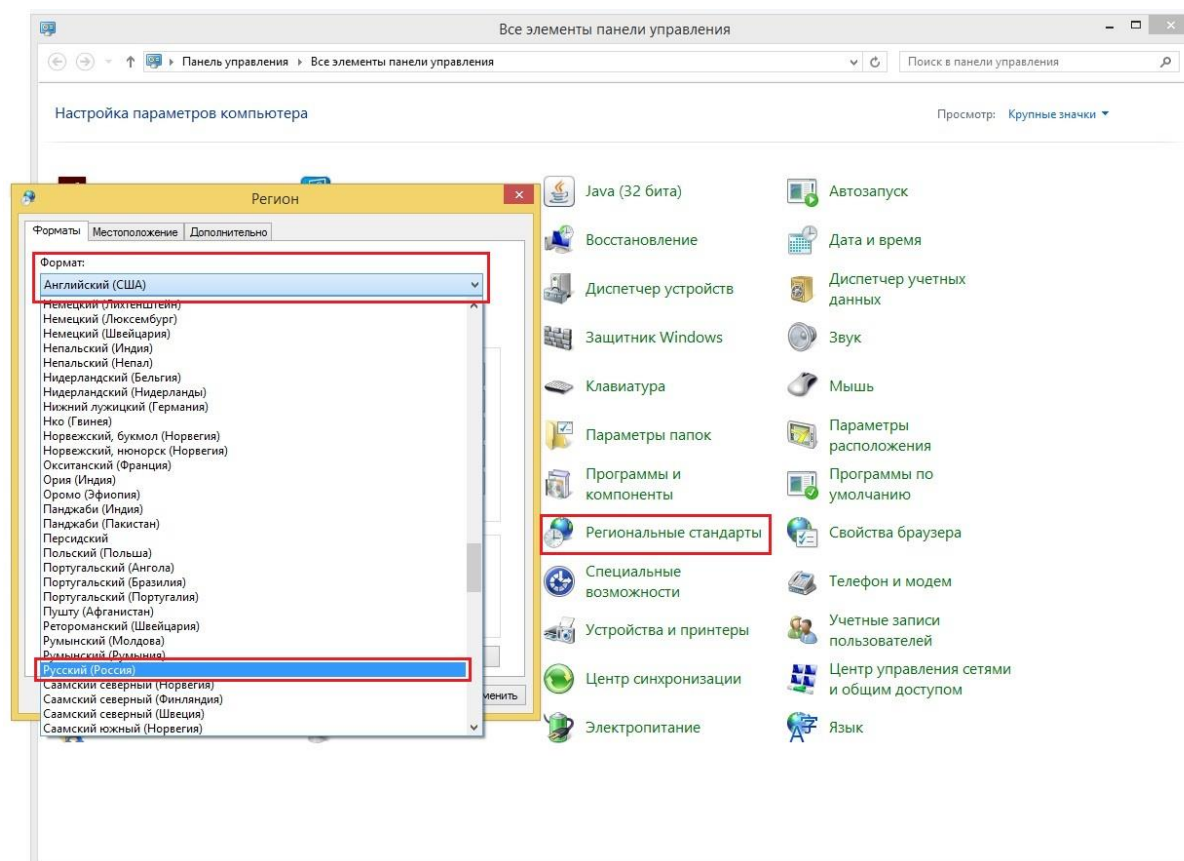

9. В окне «Формат даты и времени» в разделе «Краткая дата» вместо (дд/мм/гг) выберите (дд.мм.гггг):

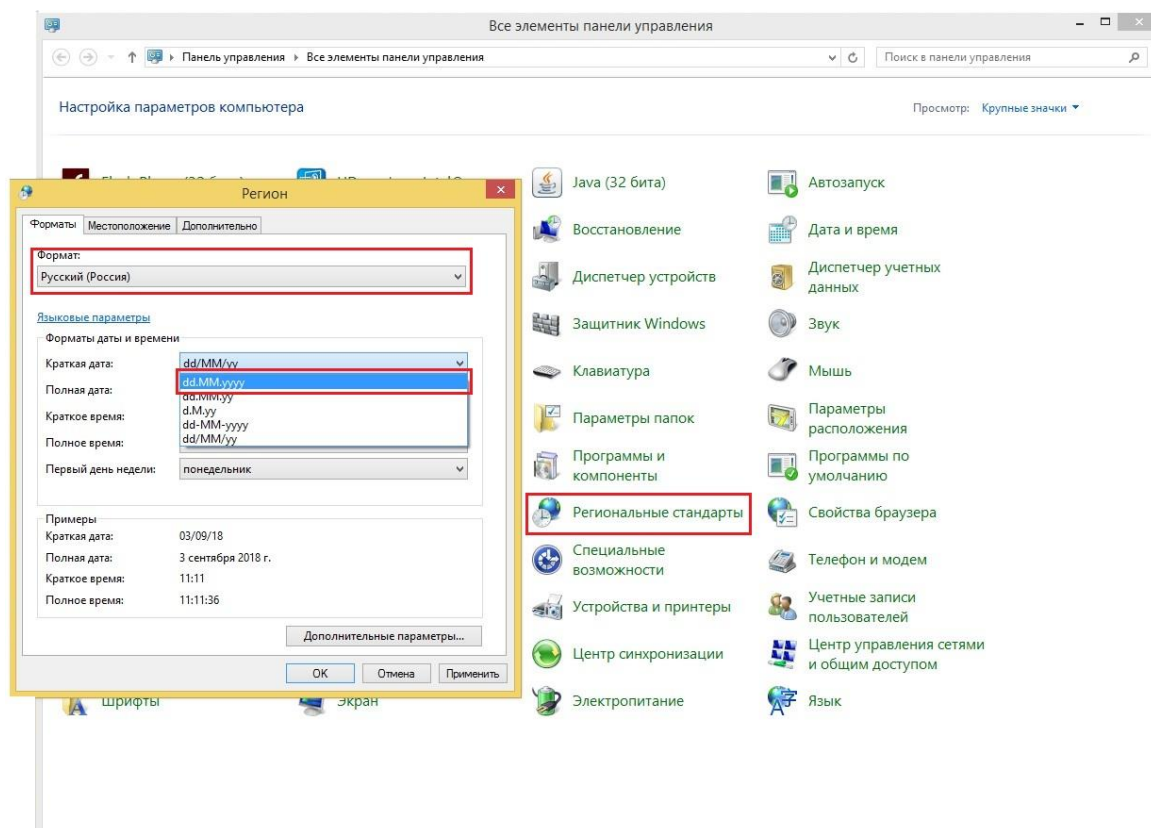


10. Нажать «Применить» и далее «ОК»

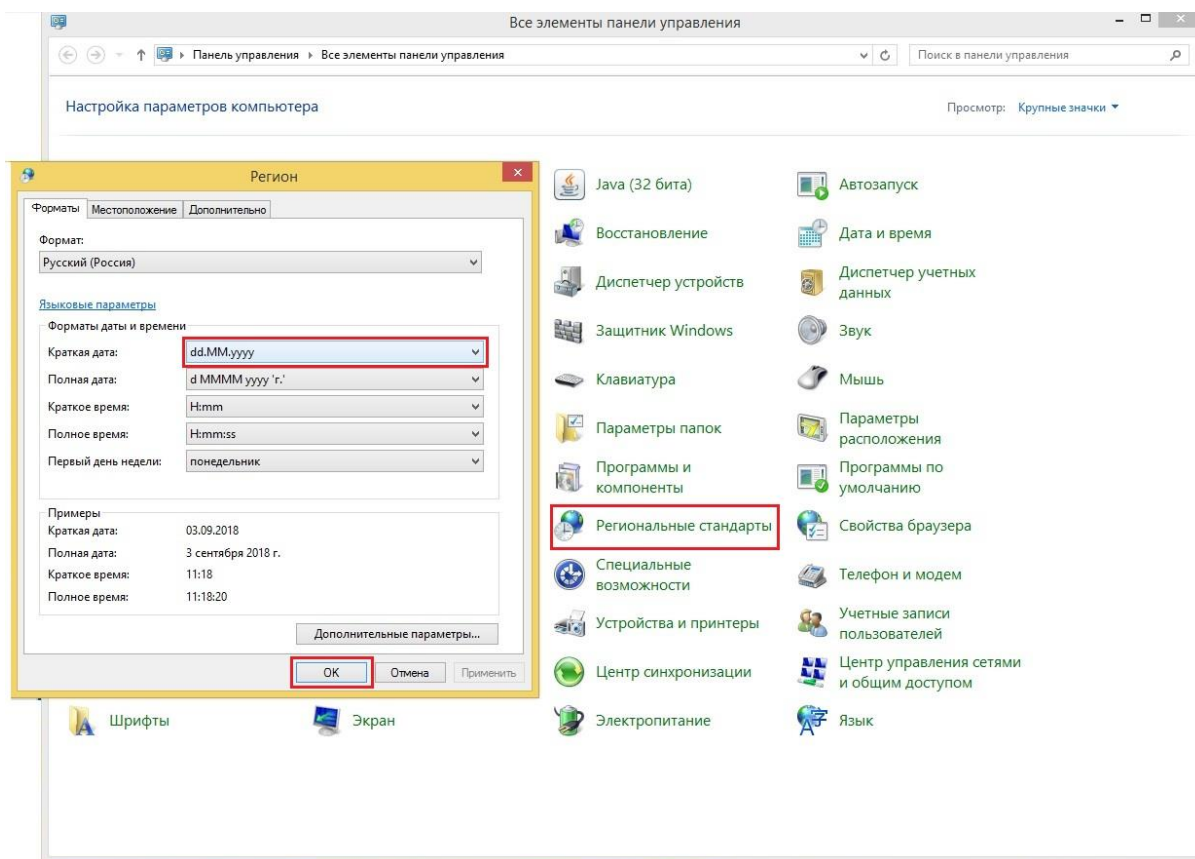


11. Перезапустите программу. Он будет запущен на английском языке.

12. Выберите «Настройка».

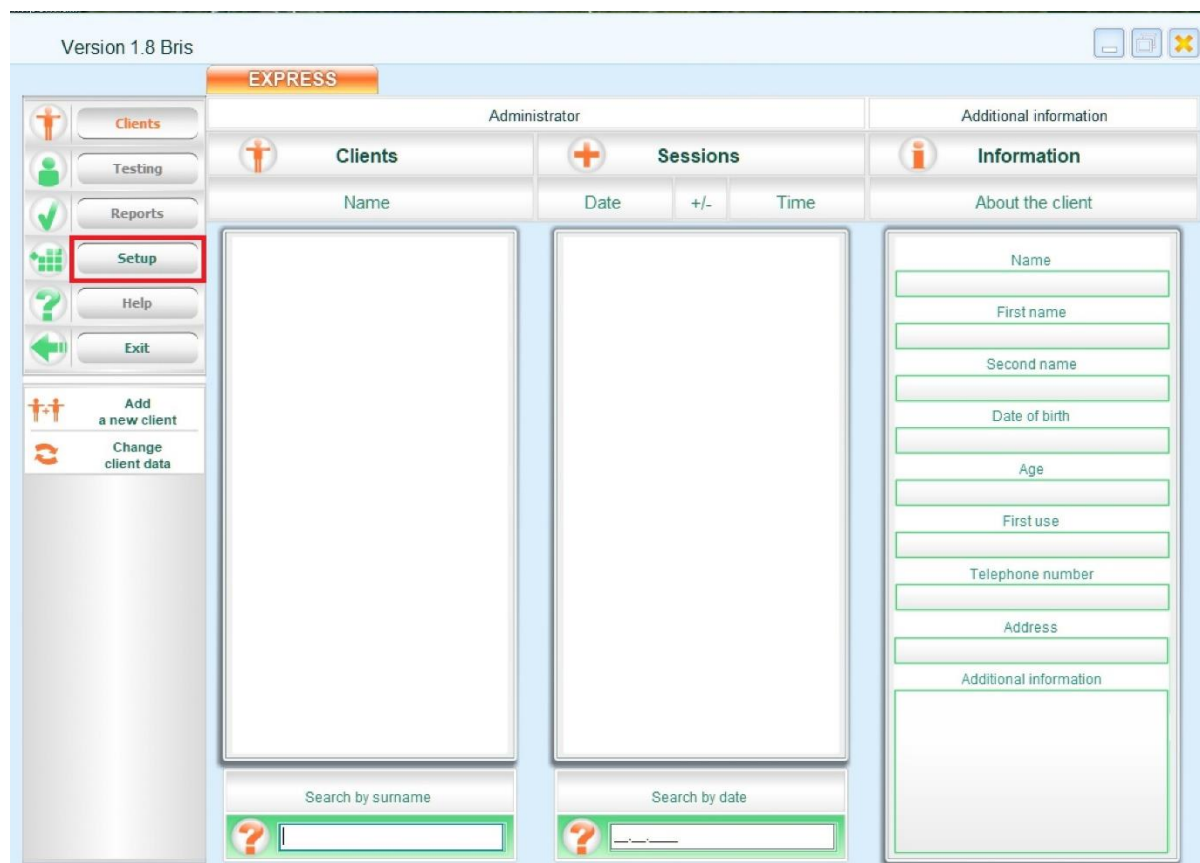


13. Выберите вкладку «Регистрация устройства» и в открывшемся окне введите регистрационный код устройства. Регистрационный код можно найти на задней стороне устройства или в паспорте устройства.


ВНИМАНИЕ, КАЖДОЕ УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД:

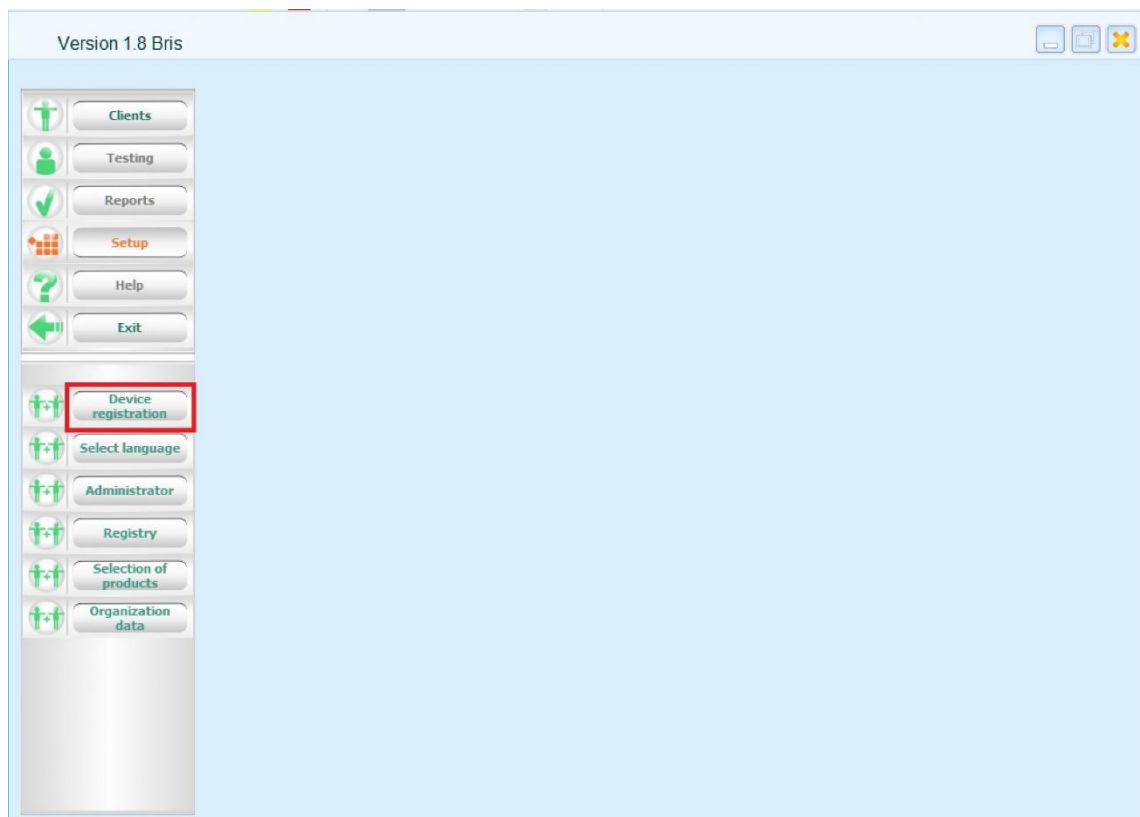


(пример регистрации устройства на следующем рисунке)

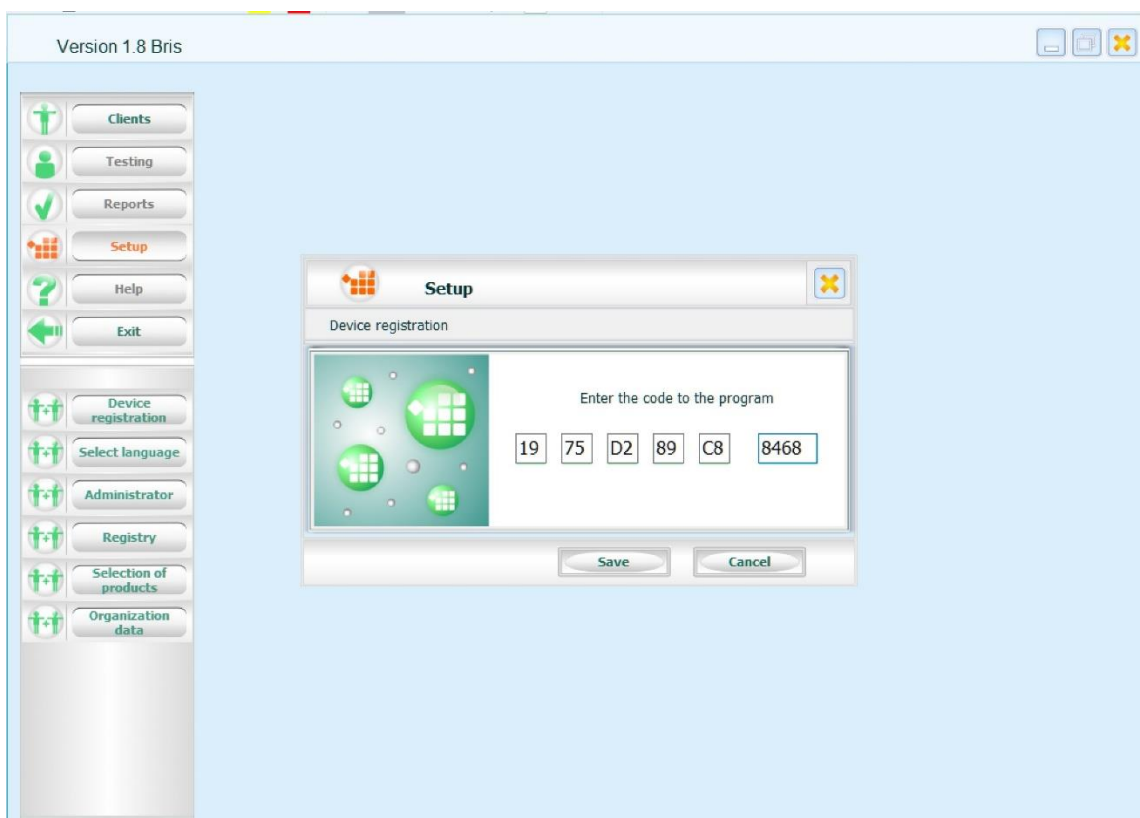


14. Как только вы введете серийный номер устройства, нажмите «Сохранить», и программа запомнит ваше устройство.

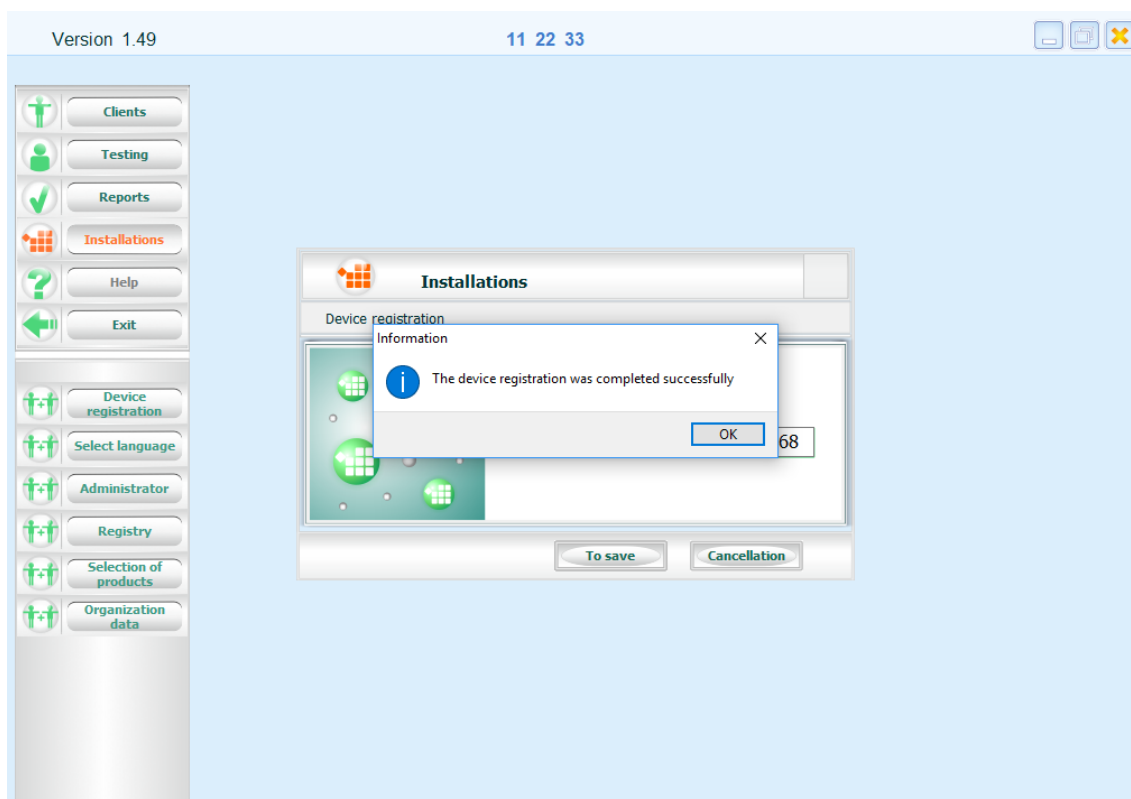


15. Как только вы сделали все шаги, вы можете изменить язык в «Установки», выбрав вкладку «Выбрать язык». В открывшемся окне выбираете интересующий язык и нажимаете «Сохранить» (на данный момент переводов на турецкий и арабский языки нет).

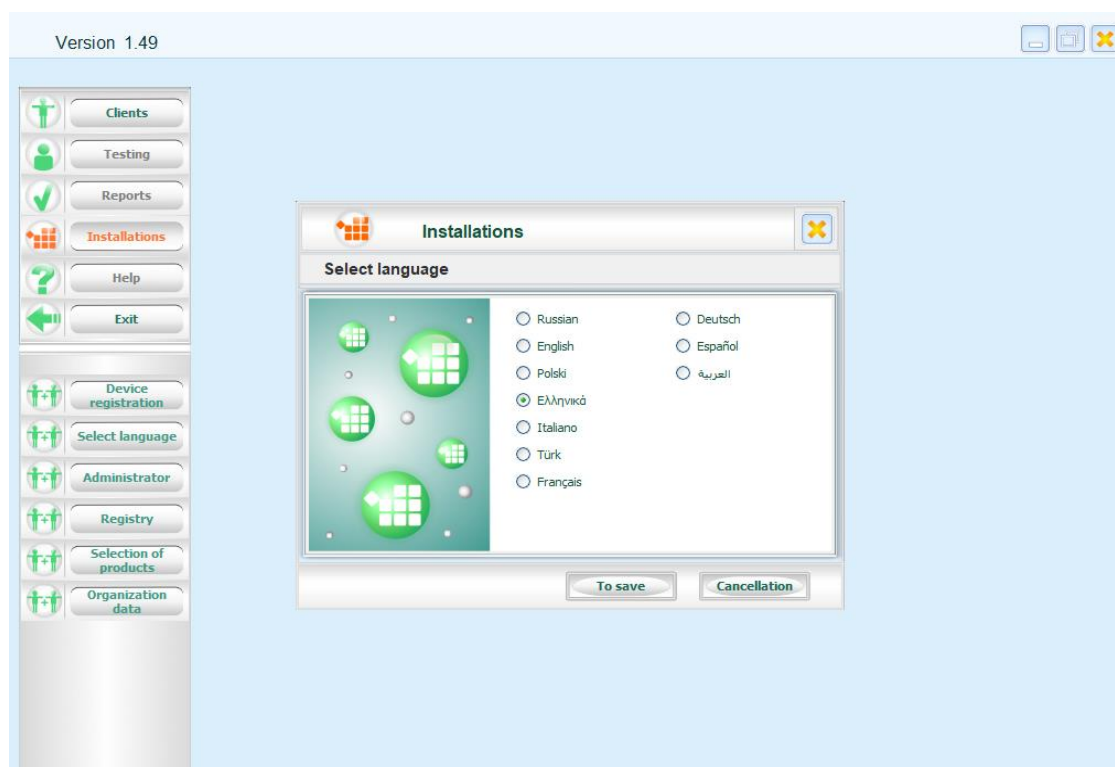


16. После выбора языка программа запросит перезагрузку. Выйдите из программы и запустите ее снова.

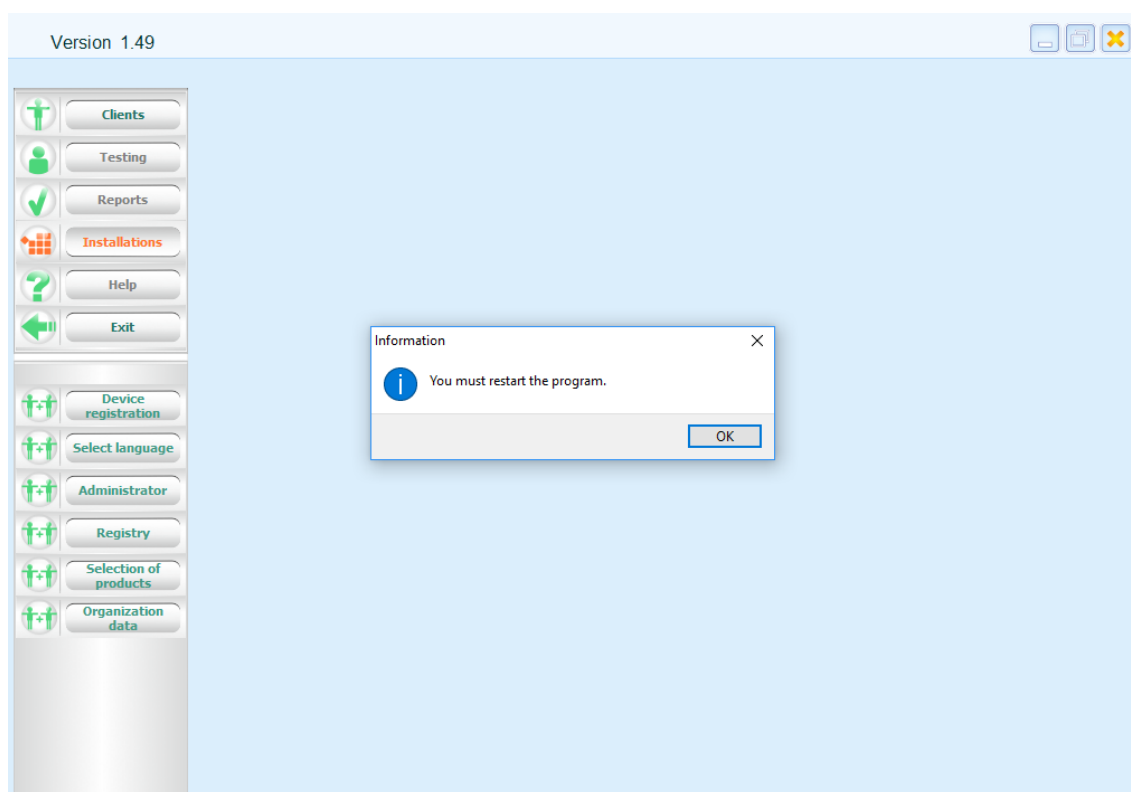


Затем программа будет запущена на выбранном языке (пример на греческом)

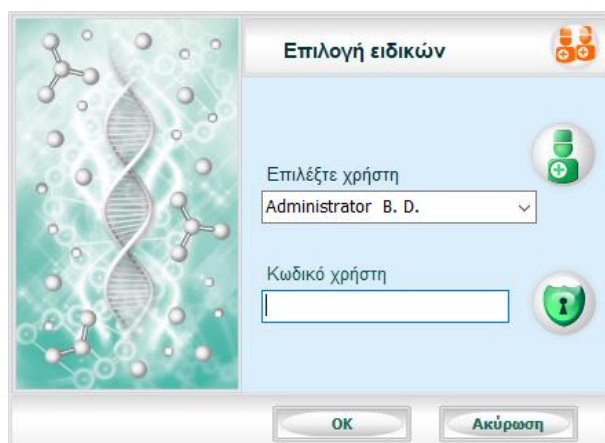

НА КОМПЬЮТЕРАХ при попытке входа в программу может появиться следующее сообщение:

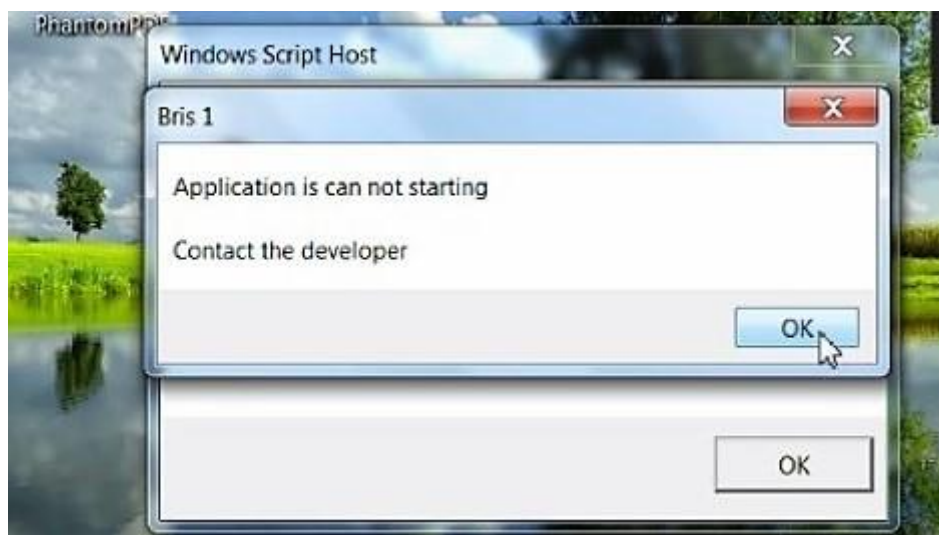

Для решения этой проблемы необходимо открыть диск C, открыть папку «2002» и запустить установку программы «AccessDatabaseEngine».

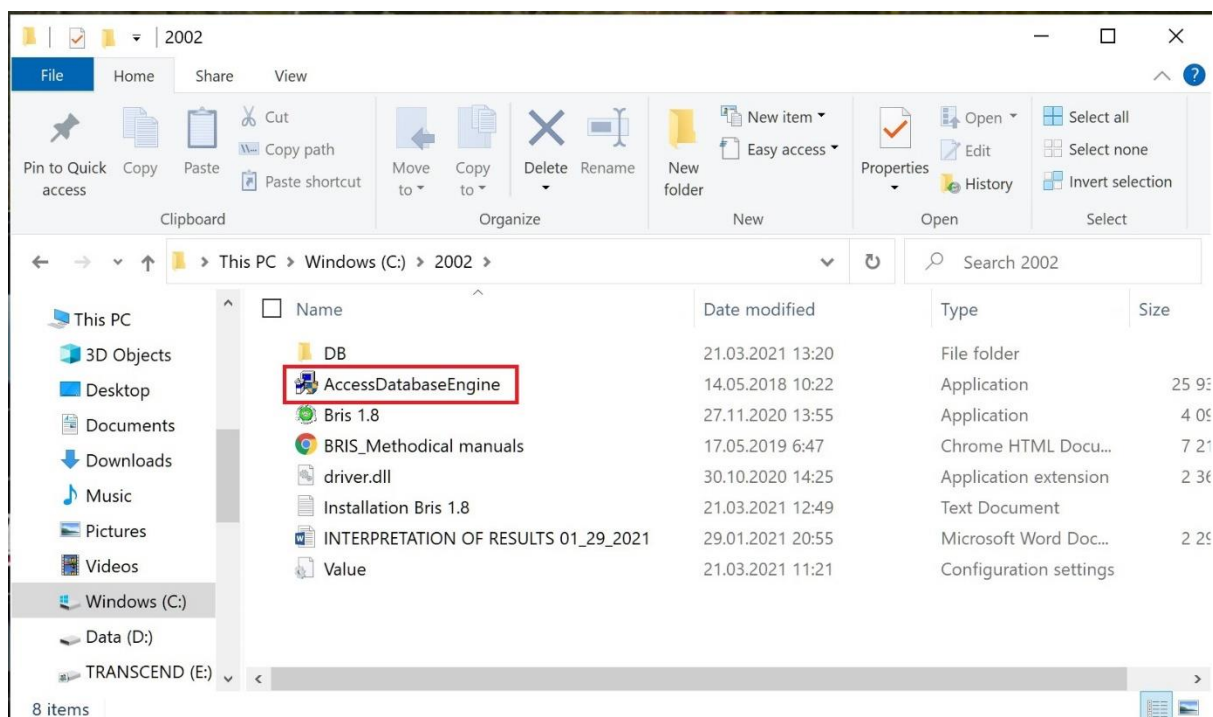

После этих шагов запустите значок «BRIS» на рабочем столе вашего компьютера.



Используйте программу во благо себе и другим!